



ユーザーマニュアル

こんにちは

Popit をお選び頂き有難うございます。


Popit Sense と Popit アプリを使用すると、時間通りのお薬服用と治療をサポートできます。

Popit Sense と Popit アプリは、服薬状況をリマインドするために現在お使いの記録システムの補足としての使用のみを想定しています。

適切な時間に服薬し、医療専門家からの指示に従うことについては、ユーザーが完全な責任を負う必要があります。

1 まず、アプリを インストールします

iPhone - App Store
Android - Google Play
Huawei - App Gallery

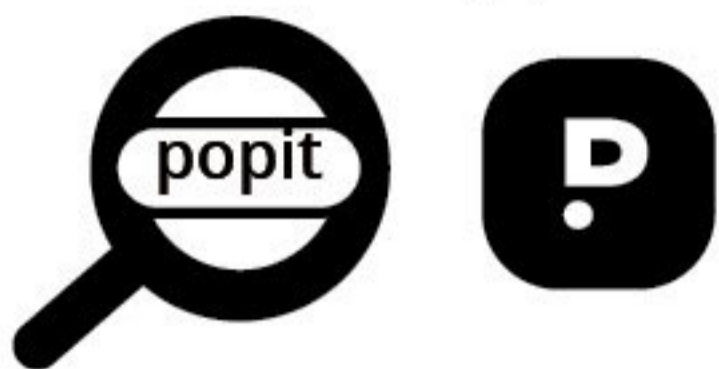


Popit アプリを開いて通知を許可し、ガイド付きムービーをご覧ください。

2 Popit Sense 各部名称について

錠剤シートスロット


ロックボタン

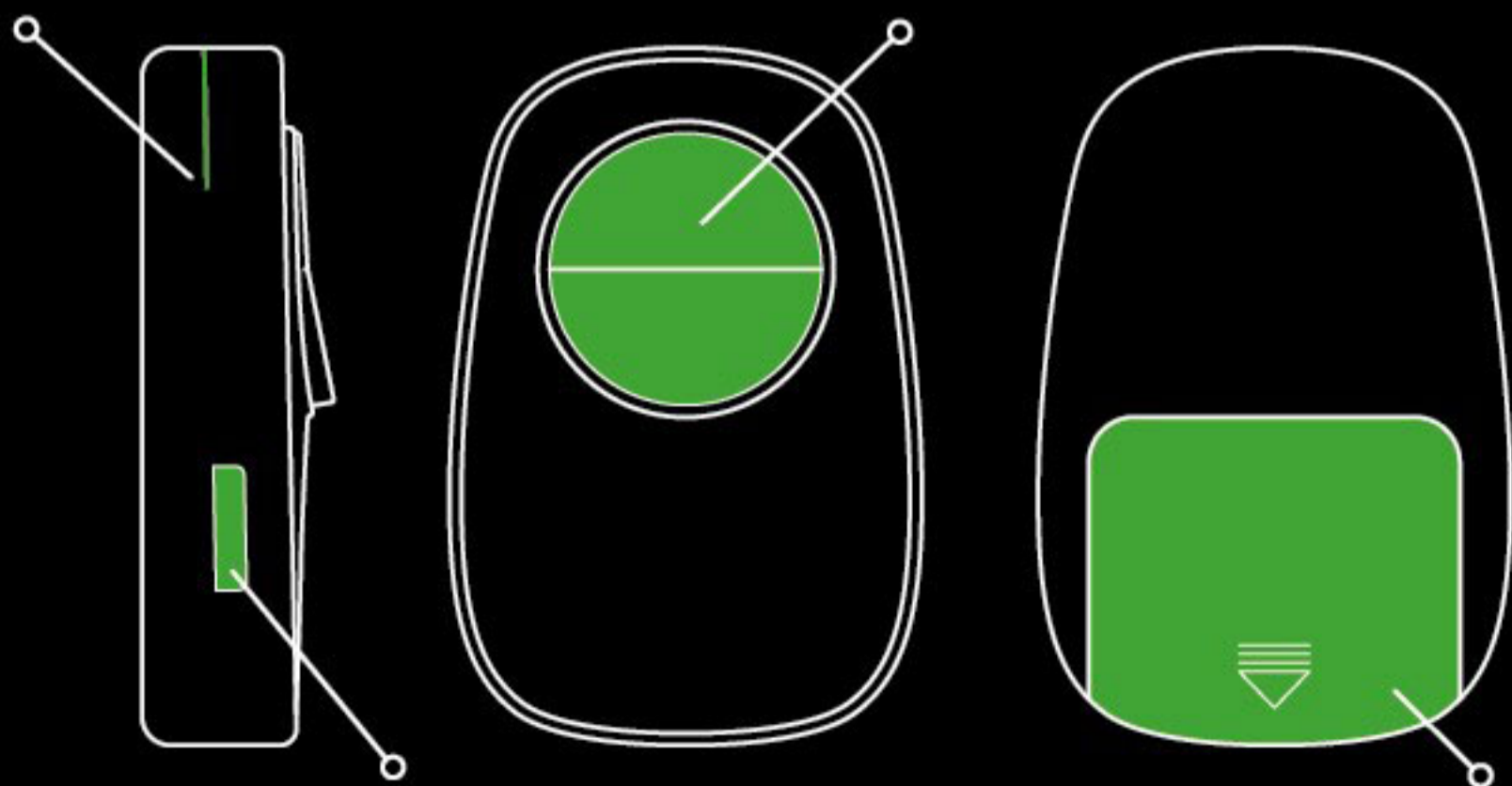

サイドボタン

電池入れ

3 お薬のシートを Popit Sense にセットします

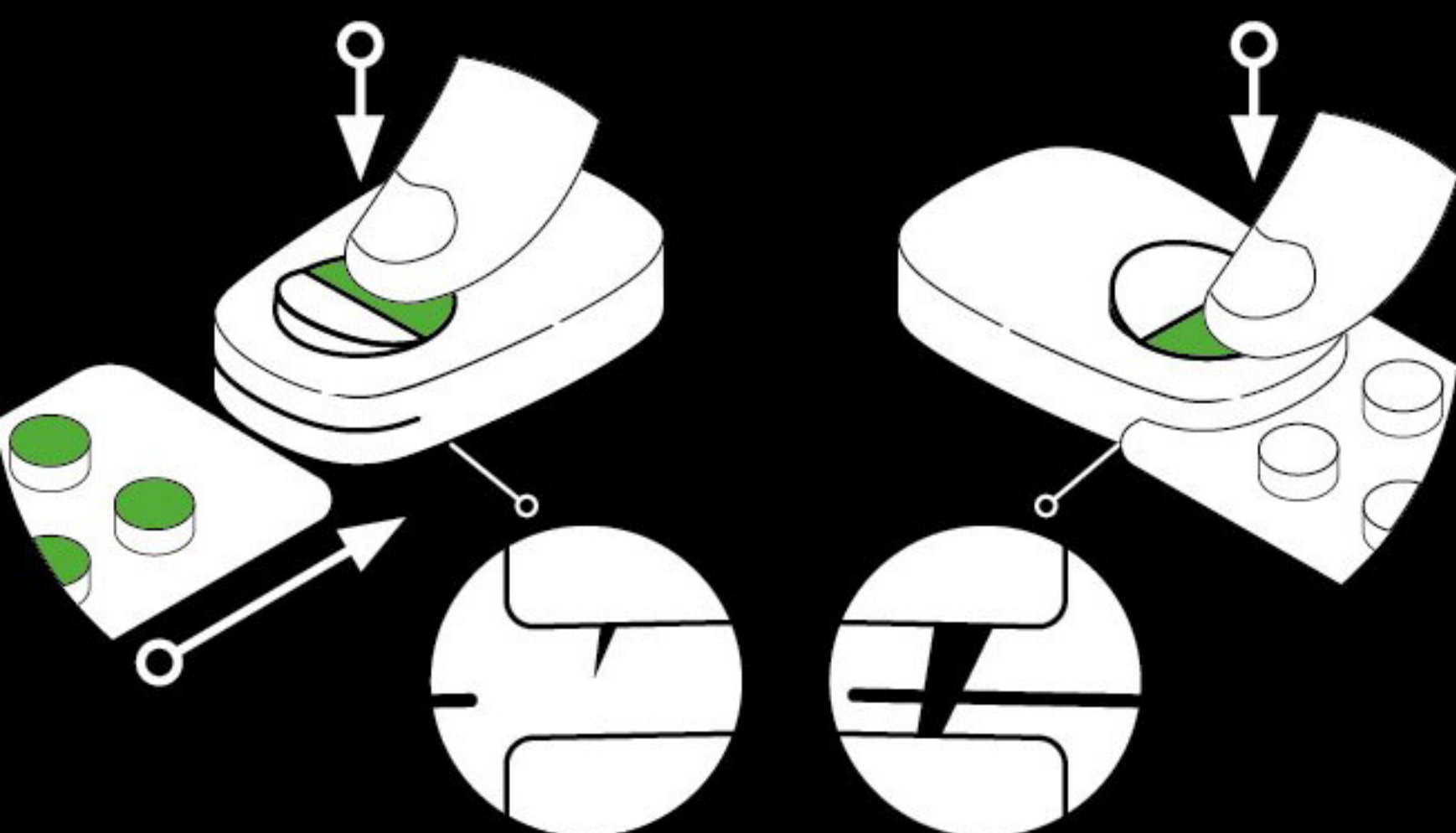

手順 A

図のように、ロックボタンの背面を押しただまま、錠剤シートを上に向けて錠剤シートスロットの奥まで挿入します。

手順 B

図のように、ロックボタンの前側をしっかりと押して、錠剤シートにロックが掛かっていることを確認してください。

錠剤シートの交換方法

手順 A のように、ロックボタン背面を押しただまま、錠剤シートを取り外します。手順 A と B を繰り返して、新しいシートを挿入します。

服薬管理を滞りなく続けるために、錠剤シートが空になったらすぐに次のシートに取り替えることをお勧めします。

4 お薬の服用を 記録する

Popit Sense は、以下のどちらかの方法でお薬の服用記録を行います。

自動記録

Popit Sense の3つのセンサーが順番に作動して、お薬がシートから取り出されたことを可能な限り正確に検出し、服用を記録します。

手動登録

自動記録のバックアップ手段として、手動で追録も可能です。

服用記録の確認

短いビープ音がピロリロ! と鳴り、**サイドボタンが緑色**に点滅すると、服用記録完了です。




自動記録

1. 動きの検出

Popit Sense は常に動きを検出しています。動きが検出されると、Popit Sense はタッチを待ち始めます。

2. タッチして Pop!

片方の手で Popit Sense を持ち、もう一方の手で錠剤シートを持ってください。

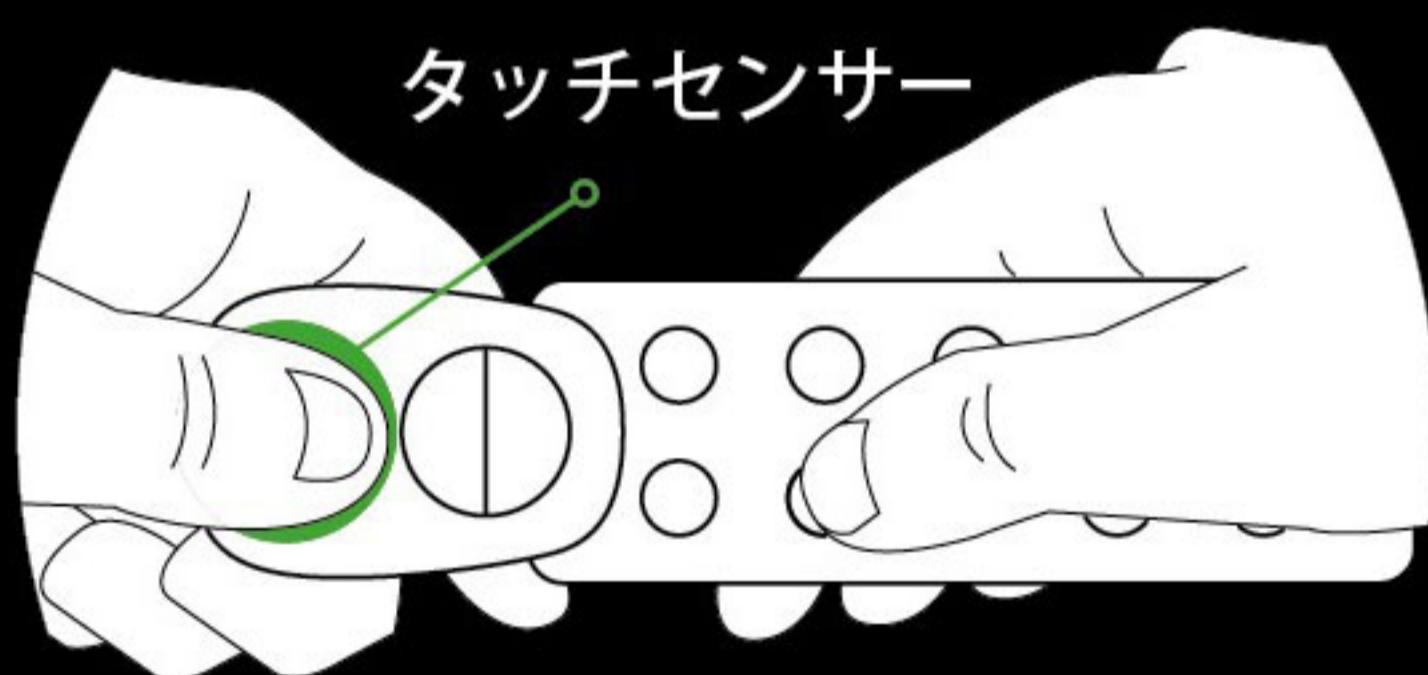

これでタッチが検出されます。短い音が、ピピッと鳴り、Popit Sense の**サイドボタンがオレンジ色**に点滅します。その後すぐに、錠剤をしっかりと取り出して下さい。

取り出す時は Popit Sense のタッチセンサーを触っていないなくても大丈夫です。

3. 服薬記録完了!

ピロリロ! という音が鳴り、**サイドボタンが緑色**に点灯し、服薬記録は完了です。

サイドボタンが緑色に点灯しなかった場合：何らかの理由で音が認識されなかった可能性があります。大丈夫です。手動で服薬登録が可能です。

間違っって服薬が複数回検出された場合：手動で記録を取り消すことができます。アプリの指示に従い、記録を取り消すことができます。

手動記録

自動記録の時と同様、Popit Sense が起動していることを確認して、サイドボタンを一度クリックしてください。

自動記録が正常に行われなかった場合の手動記録でも、同様にサイドボタンを一度クリックして下さい。ピロリロ! という音が鳴り、**サイドボタンが緑色**に点灯したら服薬記録は完了です。




Popit Sense をスリーブなしで洋服のポケットやバッグに入れるのはご遠慮下さい。センサーが過度にアクティブになる場合があります。

電池節約のために、カバンの中など過度の動きが検出された場合、Popit Sense はスリーブ状態に入ります。Popit Sense がタッチを検出しない場合、数分間休ませるか、手動検出を行ってください。数錠服用される場合、同時に服用したすべての錠剤について、確認音が1セットだけ鳴ります。

電池


Popit Sense は、3V の CR2032 リチウム金属コイン電池（付属）で可動します。電池はユーザーが交換できます。CR2032 または DL2032 型電池のみを使用してください。

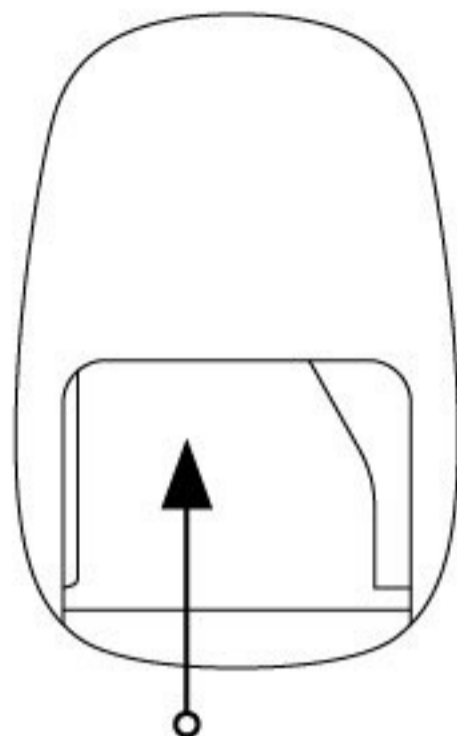

電池は通常の使用で約 3 ～ 12 か月持続します。電池の寿命は、Popit Sense が 1 日に検出する錠剤の量によって異なります。最長稼働期間は、1 日 1 錠かそれ以下の頻度の投薬した場合です。

電池の交換

電池ケースをスライドさせて開け、古い電池を取り外します。新しい電池を文字側が上を向くようにし所定位置にスライドさせます。カバーを所定位置にスライドさせて電池ケースを閉じます。ケースが正しく閉じていることを確認してください。

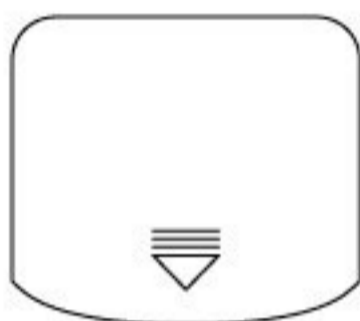

電池を充電したり、分解したり、ショートさせたりしないでください。

電池は、お住まいの地域の規制に従って適切に廃棄してください。

電池を廃棄する際は、+ 面と - 面を絶縁テープや非導電性テープで絶縁してください。リチウム電池は、適切に処分しないとショート、高温化、破裂や発火の恐れがあります。

破損した電池は使用しないでください。電池を火気に近づけないでください。

電池が壊れた場合は素手で触れず、安全ゴーグルを使用してください。

ペットや子供を電池に近づけないでください。電池を飲み込んだ場合は、すぐに緊急電話番号に電話して指示を求めてください。

新品および未使用の電池は乾燥した場所に保管し、温度を $-30 \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-22 \sim 140^{\circ}\text{F}$) に保ってください。

電池を飛行機に持ち込む場合は、航空会社の安全指示に従ってください。

重要な情報

デバイスサイズ：L45mm x W30mm x H13mm

ケース素材：プラスチック

Popit Sense は電子機器であり、取り扱いには注意が必要です。

故障または損傷しているように見える場合は、Popit Sense を使用しないでください。

周囲温度が 0° C ~ 40° C、湿度が 10% ~ 93% の環境でデバイスを使用してください。

Popit Sense に防水性はないため、常に乾いた状態を保ってください。必要に応じて、ぬるま湯で湿らせた布で拭いてください（デバイスを損傷する可能性があるため、洗剤は使用しないでください）。

高品質のコイン型電池で最大 12 か月の電池寿命に達するためには、すべてのセンサーを常にアクティブにすることはできません。このため、最高の精度を得るには、このユーザーガイドに記載されている使用方法に従うことが重要です。

多種多様な錠剤包装シートが存在し、錠剤の服用に多くの方法が利用可能なため、自動検出は時々不正確になる可能性があります。絶え間ない開発により、これらを最小限に抑えるよう努めております。

FC CE 

 **RoHS**

保証

Popit Sense には、1 年間の限定保証が付いています。つまり、不良品の場合は元の購入日から 1 年間まで交換を提供します。ユーザーは、RMA (Return Merchandising Authorization) を受け取るために弊社まで連絡する必要があります。この保証は、以下には適用されません。

- (a) 傷やへこみを含むがこれらに限定されない表面的な損傷。
- (b) 事故、誤用、不当な使用、水没、放置、乱用、電池の液漏れ、不適切なサービス、またはその他の外的原因による損傷。
- (c) 付属リーフレットに記載されている Popit Ltd. が許可または意図した使用方法以外で製品を操作したことによって引き起こされた損傷。
- (d) 改造された製品または部品
- (e) 通常の摩耗やその他の原因による製品の通常の経年劣化による欠陥。

連絡する

Popit 製品に問題が発生した場合は、スタッフが親切にお手伝いします。

www.popit.io
reachout@popit.io

Popit Ltd.
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
FINLAND

医療援助や処方箋が必要な場合は、医療専門家に連絡してください。