



KÄYTTÖOHJEET

HEI

ja kiitos, että valitsit Popitin!



Popit Sense ja Popit-sovellus muistuttavat sinua ottamaan pillerisi oikeaan aikaan ja tukevat sinua hoidossasi.

Popit Sensen ja Popit-sovelluksen on vain tarkoitus täydentää nykyisin käyttämääsi menetelmää, jonka avulla muistutat itseäsi lääkkeen ottamisesta.

Sinun on otettava täysi vastuu lääkkeidesi annostelusta asianmukaisena ajankohtana ja noudatettava terveydenhuollon ammattilaisen ohjeita.

1

ASENNA SOVELLUS

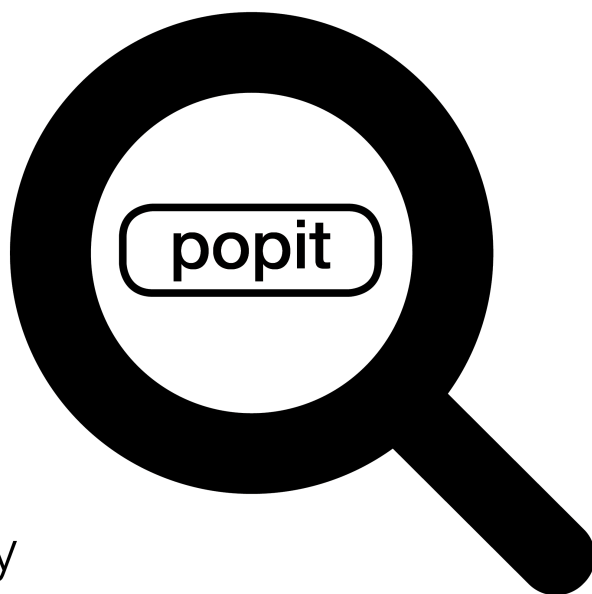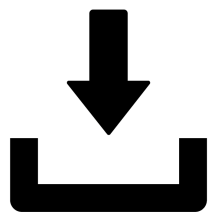

iPhone - App Store

Android - Google Play


Avaa Popit-sovellus, hyväksy ilmoitukset, ja nauti opastetusta kierroksesta.

2

TUTUSTU POPIT SENSEEN


Pillerilevyn paikka

Lukituspainike

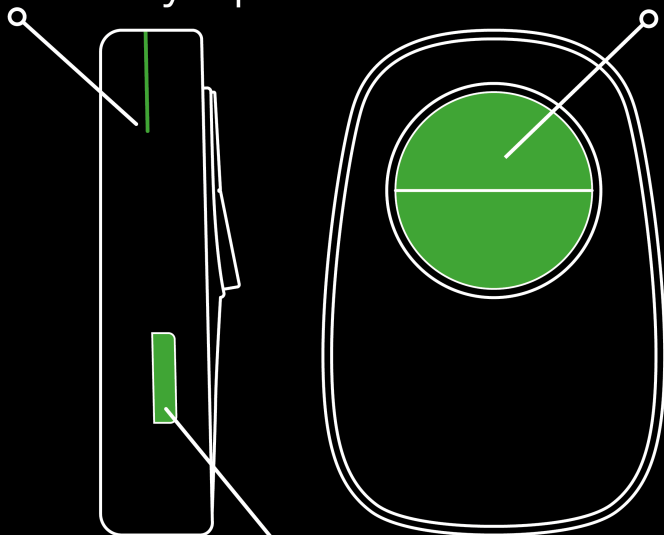


Sivupainike

Paristokotelo

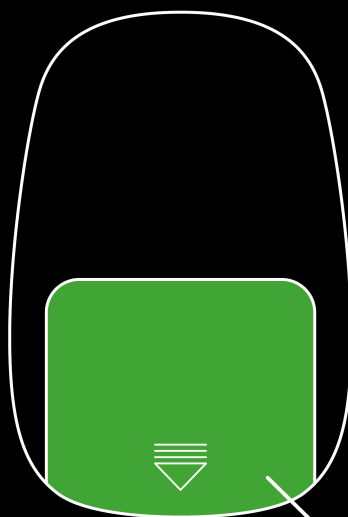

3

YHDISTÄ PILLERISI

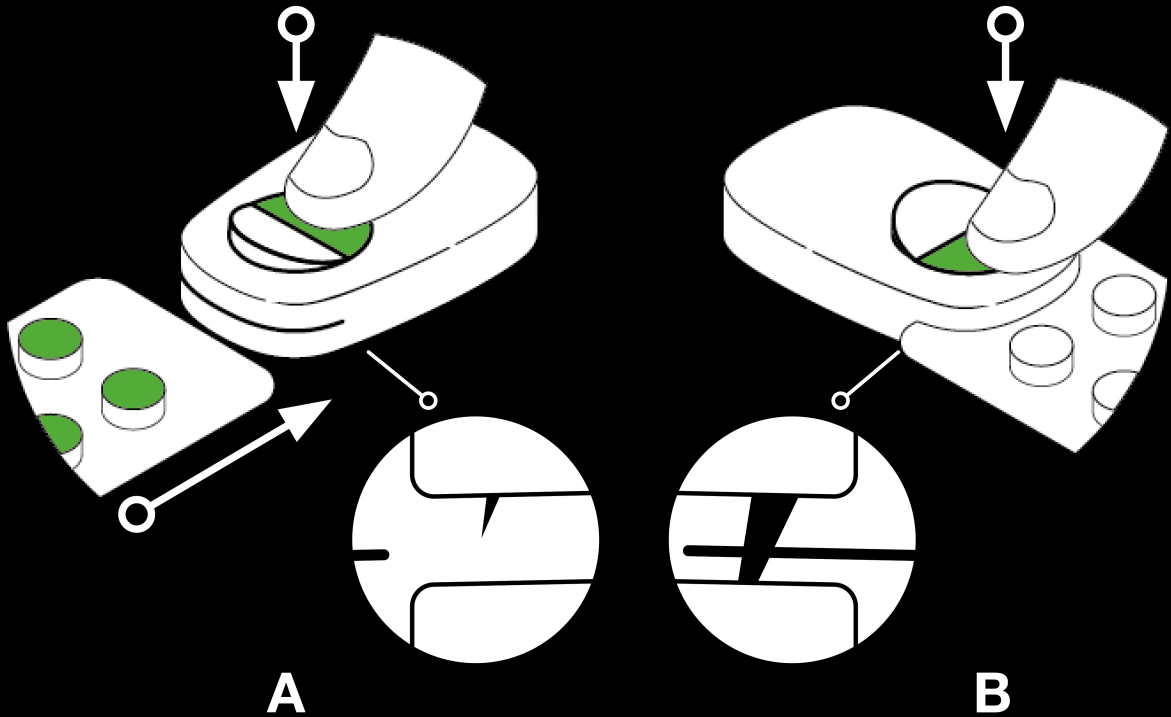

A

PAINA ja PIDÄ
lukituspainikkeen
takaosaa alhaalla, ja
asetä pillerilevy pillerit
ylöspäin.

B

Lukitse
lukitusmekanismi
painamalla
lukitusnappulan toista
päättä napakasti.

PILLERILEVYN VAIHTAMINEN

Paina ja pidä lukitusnappulaa alhaalla kuten vaiheessa A ja poista pillerilevy. Asetä uusi levy toistamalla A ja B.

Vaihda pillerilevy heti kun edellinen on tyhjä, jotta pillereiden seuranta on saumatonta.

4 PILLERIN OTTAMINEN

Popit Sense tallentaa pillerin ottamisen kahdella tapaa:

AUTOMAATTINEN TUNNISTUS


Kolme anturia toimivat peräkkäin, jotta pillerin ottaminen tunnistettaisiin tarkasti.

MANUAALINEN TUNNISTUS


Popit Sensessä on automaattisen tunnistuksen lisäksi varalta manuaalinen tunnistus.

VAHVISTUSÄÄNI

Kummallakin tunnistusmenetelmällä kuulet neljä nousevaa äänimerkkiä, jotka vahvistavat, että annoksesi on tallennettu.

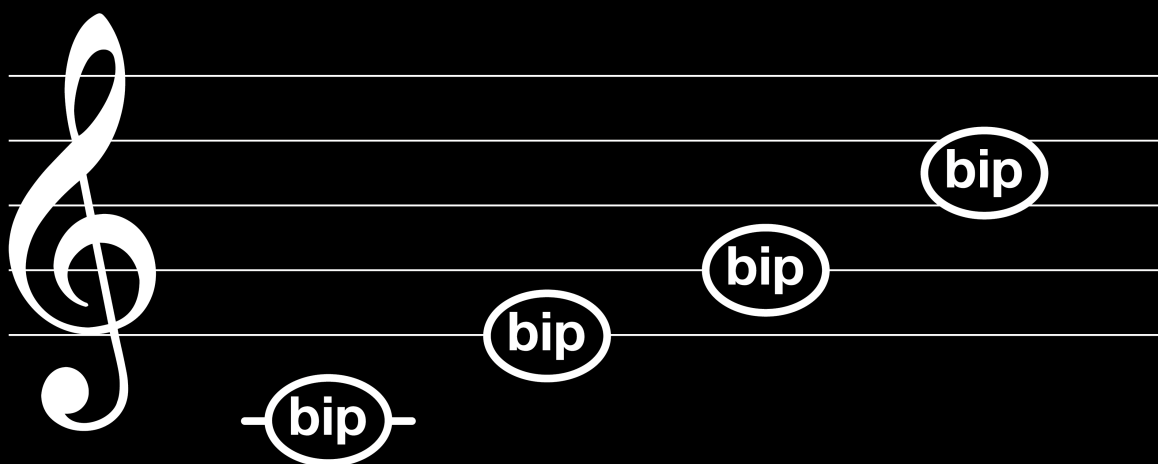


AUTOMAATTINEN

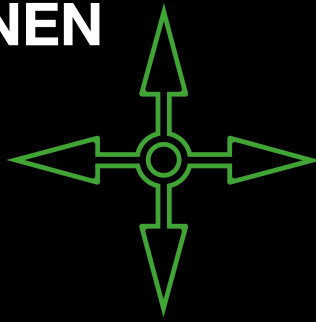

LIIKE

Popit Sense havainnoi jatkuvasti liikettä, ja liikettä havaitessaan laite alkaa odottaa kosketusta.

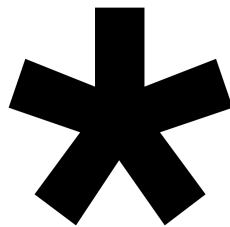

Otatko useita pillereitä? Kuulet vain yhden vahvistusäänisarjan kaikille samaan aikaan otetuille pillereille.

Tallentuiko pilleri vahingossa? Ei hätää! Popit-sovellus sallii annoksen poiston.


Eikö kosketusta tunnisteta? Jos liikettä on liikaa, laite säästää paristoa menemällä lepotilaan. Anna sen levätä pari minuuttia tai käytä manuaalista tunnistusta.

Älä kannna Popit Senseä taskussa. Taskussa anturit voivat aktivoitua.




KOSKETUS


Jotta kosketus rekisteröityy, ota pilleri seuraavasti:

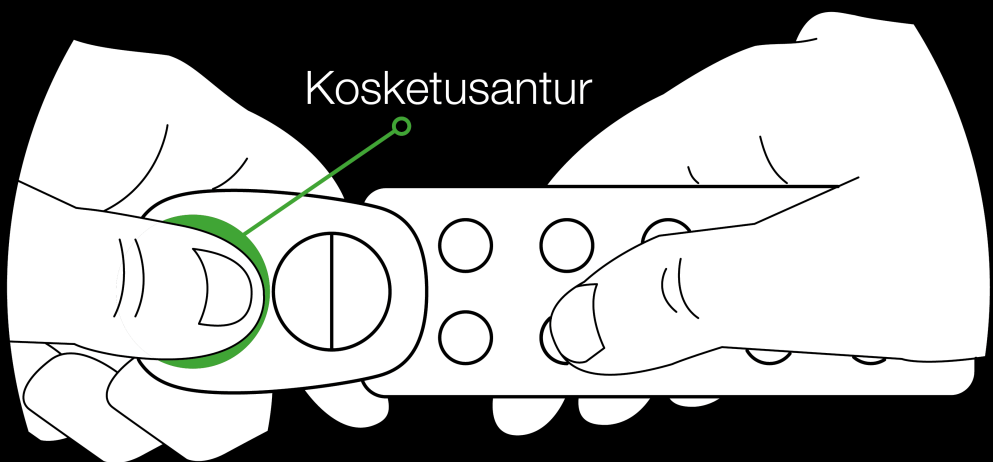

Pidä laitetta ja pillerilevyä niin, että yksi käsi pitää laitetta ja toinen pillerilevyä.

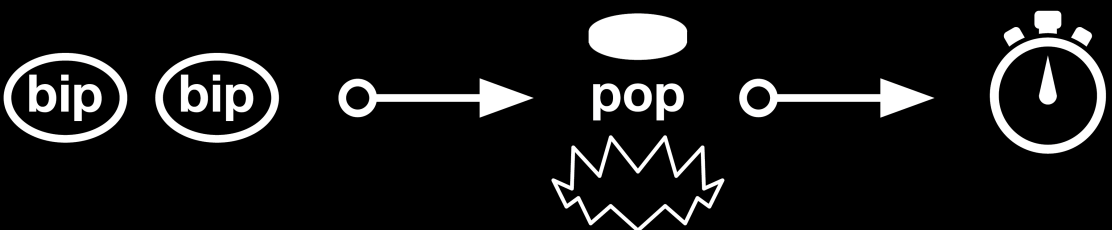


Kun kosketus havaitaan, kuulet 2 äänimerkkiä. Irrota pilleri napakasti muutaman sekunnin sisällä.

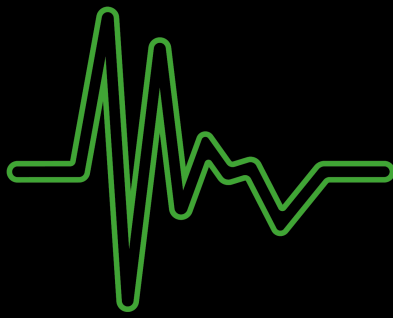


ÄÄNI

Popit Sense kuulee lopuksi pillerin irrottamisen äänen. Jos se onnistuu hyvin, sivunappula vilkkuu vahvistusäänen lisäksi.

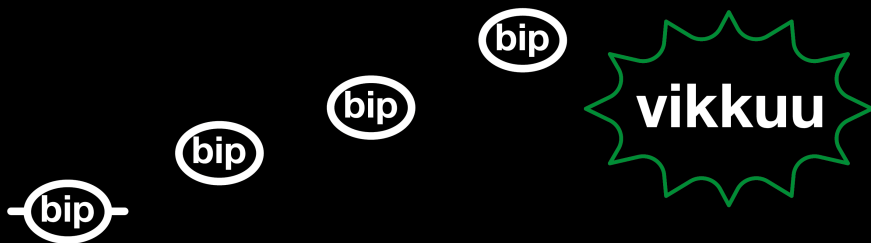

Etkö saanut sitä? Ei hätää! Käytä manuaalista tunnistusta.


MANUAALINEN

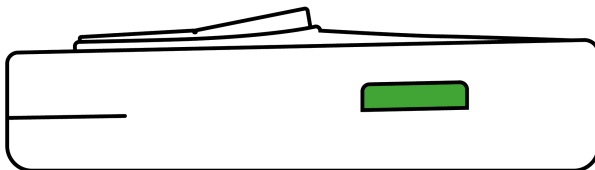

Tallenna annos manuaalisesti painamalla Popit Sensen sivunappulaa lyhyesti. Jos otat useita pillereitä, sitä tarvitsee painaa vain kerran otettuasi kaikki pillerit.


Annoksen voi myös tallentaa Popit-sovellukseen manuaalisesti.

PARISTO

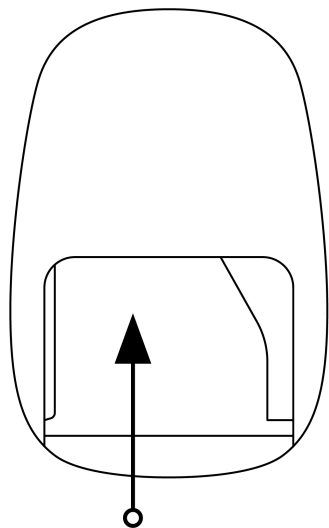


Popit Sense toimii 3 V:n CR2032 litiumnap-piparistolla (pakkauksessa). Käyttäjä voi itse vaihtaa pariston. Käytä vain tunnettujen tuote-merkkien CR2032- tai DL2032-tyypin paristoja.

Paristo kestää normaalissa käytössä noin 3–12 kk. Pariston kesto riippuu siitä, kuinka monta pilleriä Popit Sensen täytyy havaita päivässä. Pisin käyttöaika saavutetaan, jos pillereitä otetaan yksi tai vähemmän päivässä.

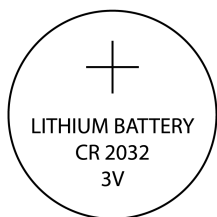

PARISTON VAIHTAMINEN

Liu'uta paristokotelo auki ja poista vanha paristo. Aseta uusi paristo paikalleen ja varmista, että sen tekstipuoli on ylöspäin. Sulje paristokotelo liu'uttamalla sen kansi paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.

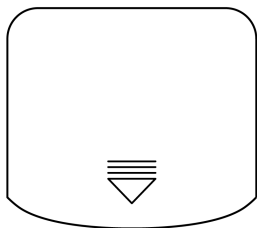

Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä oikosulkea.

Paristot on hävitettävä asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaan.

Jos paristot poistetaan, eristä + ja - pinnat eristävällä tai ei-johtavalla teipillä. Väärin hävitettyinä litiumparistot voivat aiheuttaa oikosulun ja kuumeta, puhjeta tai syttyä palamaan.

Älä käytä vahingoittunutta paristoa. Pidä paristo poissa avotulesta. Jos paristo on rikki, älä kosketa sitä paljain käsin ja käytä suojalaseja.

Pidä paristo poissa lemmikkien ja lasten ulottuvilta. Jos paristo niellään, soita välittömästi hätänumeroon ja pyydä lisäohjeita.

Säilytä uudet ja käyttämättömät paristot kuivassa paikassa ja -30–60 °C lämpötilassa.

Jos paristo viedään lentokoneeseen, noudata lentoyhtiön turvallisuusohjeita.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Laitteen koko: P45mmxL30mmxK13mm
Kotelon materiaali: Muovi

Popit Sense on elektroninen laite ja sitä on käsiteltävä huolella..

Älä käytä Popit Senseä, jos se tuntuu toimivan väärin tai vahingoittuneen.

Käytä laitetta tilassa, jossa lämpötila on 0–40 °C ja ilmankosteus 10–93%.

Popit Sense ei ole vedenkestävä ja se on pidettävä aina kuivana. Puhdista tarvittaessa kostealla, haalealla liinalla (Ei SAA käyttää puhdistusainetta, se voi heikentää laitetta).

Jotta laadukkaalla nappiparistolla saavutettaisiin 12 kuukauden käyttöikä, kaikki anturit eivät voi olla aktiivisia kaiken aikaa. On tärkeää noudattaa tässä käyttöoppaassa esitettyä käyttötapaa, jotta saavutetaan paras mahdollinen tarkkuus.

Koska läpipainopakkauksia ja pillereiden ottotapoja on hyvin monenlaisia, automaattinen tunnistus voi joskus antaa vääriä tuloksia. Pyrimme minimoimaan tämän kehittämällä tuotetta jatkuvasti.


HÄVITTÄMINEN

SER: Tämä symboli tuotteessa ja sen pakkauksessa merkitsee, että tuote on hävitettävä erikseen tavallisesta kotitalousjätteestä sen käyttöään jälkeen.

Huomaa, että on sinun velvollisuutesi hävittää elektroniset laitteet kierrätyskeskuksissa ja edistää siten luonnonvarojen suojelua.

Jokaisessa Euroopan unionin maassa pitäisi olla keräyskeskuksia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen.

Lisätietoja kierrätyspisteistä saa ottamalla yhteyttä paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuoltoviranomaiseen tai jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen.

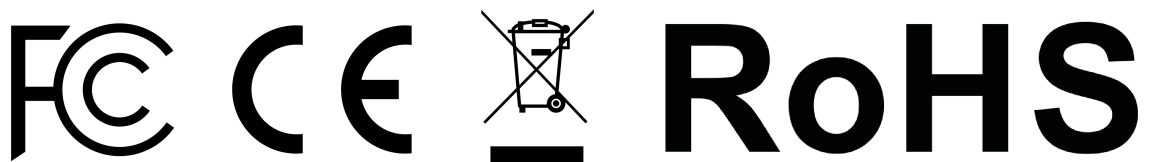

TAKUU

Popit Sensellä on yhden (1) vuoden rajoitettu takuu. Se tarkoittaa sitä, että vaihdamme vialliset tuotteet yhden vuoden sisällä alkuperäisestä ostopäivästä. Asiakkaan on pyydettävä meiltä RMA (Return Merchandising Authorization, lupa palauttaa kauppatavara). Tämä takuu ei kata:

- (a) kosmeettisia vahinkoja, mukaan lukien esim. naarmuja ja lommoja.
- (b) onnettomuuden, väärän tai kohtuuttoman käytön, veteen upottamisen, laiminlyönnin, väärinkäytön, paristovuodon, vääränlaisen huollon tai muiden ulkoisten syiden aiheuttamia vahinkoja.
- (c) vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä muihin kuin Popitin pakkausselosteessa kuvaamiin sallittuihin tai esitettyihin käyttötarkoituksiin.
- (d) muunneltua tuotetta tai sen osaa.
- (e) normaalista käytöstä ja kulumisesta tai tuotteen normaalista ikääntymisestä johtuvia vikoja.

OIKEUDELLISET TIEDOT

Sääntelyilmoitukset: Euroopan unioni: CE-direktiivi:

ILMOITUS: Popit Ltd. vakuuttaa, että Popit Sense täyttää olennaisilta osin direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja muut asianmukaiset ehdot.

OTA YHTEYTTÄ

jos sinulla on ongelmia Popit-tuotteesi kanssa. Henkilökuntamme auttaa mielellään.

www.popit.io
reachout@popit.io

Popit Ltd.
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
FINLAND

Ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos tarvitset lääkärin palveluja tai lääkemääräyksen.