



**MODE D'EMPLOI**

# BONJOUR


et merci d'avoir choisi Popit !

Popit Sense et l'appli Popit vous aident à vous souvenir de prendre vos comprimés comme prévu et facilitent votre traitement médical.

Popit Sense et l'appli Popit visent uniquement à compléter tout système de rappel utilisé actuellement pour vous rappeler de prendre vos médicaments.

Vous devez assumer l'entière responsabilité de l'administration de vos médicaments au moment opportun, et suivre les instructions de votre médecin.

# 1 INSTALLER L'APPLI

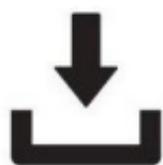

iPhone - App Store



Android - Google Play

Ouvrez l'appli Popit et autorisez les notifications, puis suivez la visite guidée.

# 2 DÉCOUVRIR VOTRE POPIT SENSE

Fente pour plaquette

Bouton de verrouillage

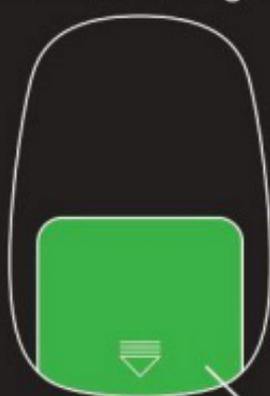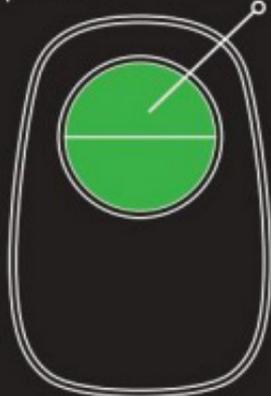


Bouton latéral

Compartiment à pile


# 3

## CONNECTER VOS COMPRIMÉS

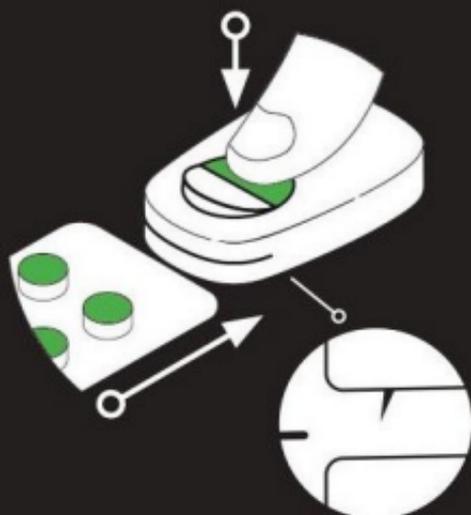

**A**

APPUYEZ ET  
MAINTENEZ la partie  
arrière du bouton de  
verrouillage et insérez la  
plaquette orientée vers  
le haut.

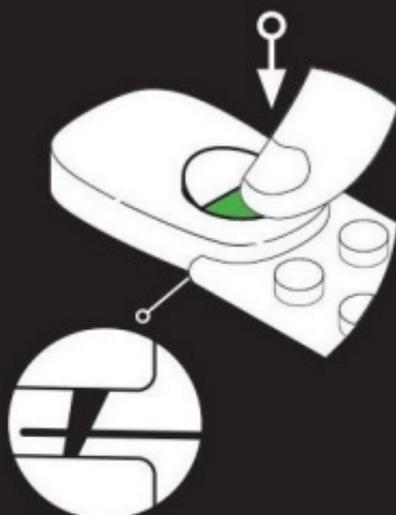

**B**

Appuyez fermement sur  
l'autre partie du bouton  
de verrouillage pour  
sécuriser le mécanisme  
de verrouillage.

### CHANGER DE PLAQUETTE

Appuyez et maintenez le bouton de verrouillage selon l'étape A et retirez la plaquette. Répétez les étapes A et B pour insérer la nouvelle.

Remplacez la plaquette immédiatement après avoir terminé la précédente pour un suivi continu.

# 4

## PRISE DES COMPRIMÉS

La prise de vos comprimés peut être enregistrée de deux façons :

### DÉTECTION AUTOMATIQUE


Trois capteurs fonctionnent en séquence pour détecter l'extraction d'un comprimé aussi précisément que possible.

### DÉTECTION

Popit Sense propose la détection manuelle au cas où la détection automatique ne fonctionnerait pas.

### SON DE CONFIRMATION

Quelle que soit la méthode de détection, quatre bips sonores croissants confirmeront l'enregistrement de votre dose.

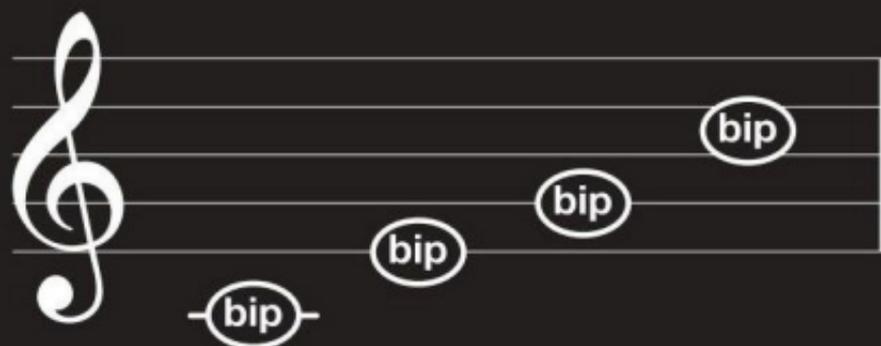

## AUTOMATIQUE



## MOUVEMENT

Popit Sense détecte en permanence les mouvements et, le cas échéant, se met en attente d'un contact.



**Vous prenez plusieurs comprimés en même temps ?** Vous n'entendrez alors qu'un seul son de confirmation.

**Vous avez enregistré un comprimé par erreur ?** Aucun souci, l'appli Popit vous permet d'enlever cette dose.


**Un contact non détecté ?** En cas de mouvements excessifs, l'appareil se met en veille pour économiser la pile. Laissez-le se reposer quelques minutes ou utilisez la détection manuelle.

**Ne transportez pas Popit Sense sur vous.** Cela pourrait activer les capteurs.




## TOUCHER


Pour enregistrer un contact, suivez ces étapes lors de la prise d'un comprimé :

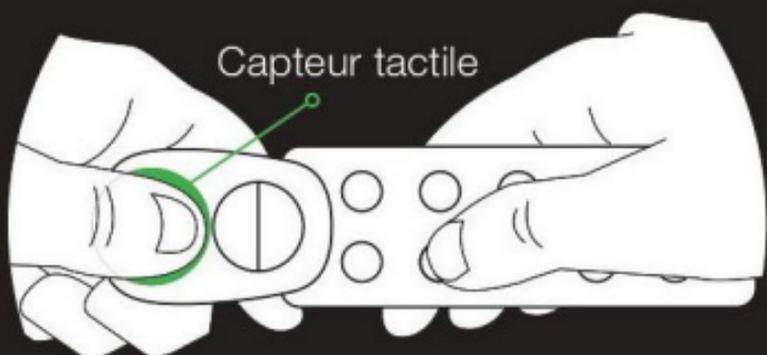

Tenez l'appareil dans une main et la plaquette dans l'autre main.

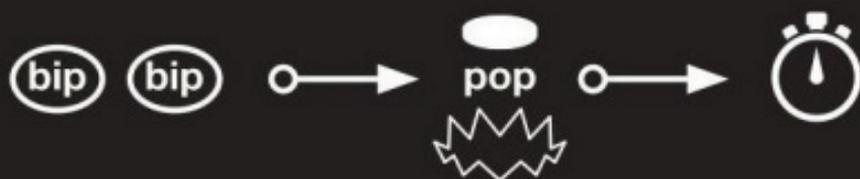

Lorsqu'un contact est détecté, vous entendez un double bip. Sortez alors fermement un comprimé dans les secondes qui suivent.

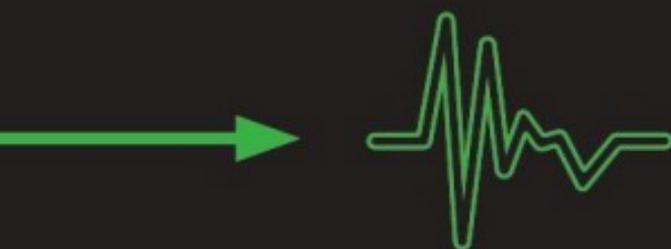


## SON

Enfin, Popit Sense écoute le son de l'extraction du comprimé. Si tout se passe bien, le bouton latéral clignote en plus du son de confirmation.



Ça ne fonctionne pas ? Vous pouvez toujours utiliser la détection manuelle.


## MANUELLE

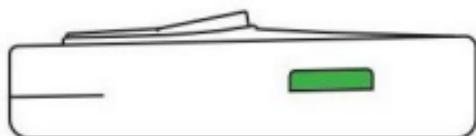

Appuyez brièvement sur le bouton latéral pour enregistrer votre dose manuellement. Si vous prenez plusieurs comprimés, appuyez une seule fois dessus à la fin.

Vous pouvez aussi enregistrer manuellement votre dose sur l'appli Popit.

## LA PILE

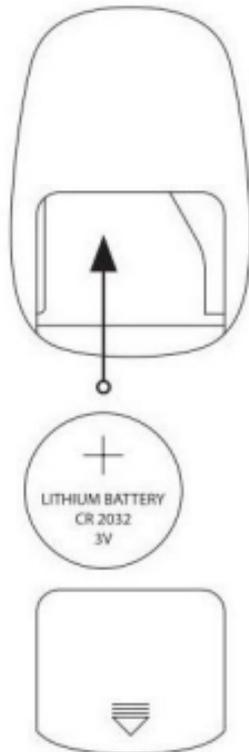

Popit Sense est alimenté par une pile bouton au lithium CR2032 3V (fournie) remplaçable. Utilisez uniquement des piles acceptées de type CR2032 ou DL2032 de marques reconnues.

La pile dure environ 3 à 12 mois avec une utilisation normale. Sa durée de vie dépend du nombre de comprimés que Popit Sense devra détecter chaque jour. La durée de fonctionnement la plus longue est atteinte avec un comprimé par jour ou moins.

### REMPLENER LA PILE

Ouvrez le compartiment à pile et retirez la pile usagée. Insérez la pile neuve en vous assurant que le texte sur la pile est orienté vers le haut. Remplacez le cache du compartiment à pile en veillant à bien refermer le boîtier.

N'essayez pas de charger, démonter ou court-circuiter la pile.

Les piles doivent être éliminées selon les réglementations locales.

Lorsque vous jetez des piles, isolez les extrémités + et - avec du ruban isolant ou non conducteur. En cas d'élimination inadéquate, les piles au lithium peuvent provoquer un court-circuit et ainsi chauffer, exploser ou s'enflammer.

N'utilisez pas de pile endommagée. Conservez la pile hors de portée des flammes. Ne touchez pas une pile cassée à mains nues et utilisez des lunettes de protection.

Gardez les animaux et les enfants hors de la portée de la pile. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un numéro d'urgence pour obtenir des instructions.

Rangez les piles neuves et inutilisées dans un endroit sec avec une température entre -30 et +60 °C.

Si vous emportez la pile à bord d'un avion, suivez les instructions de sécurité de la compagnie aérienne.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Taille de l'appareil : L 45 mm x L 30 mm x H 13 mm

Matériau du boîtier : plastique

Popit Sense est un appareil électronique à manipuler avec précaution.

Ne l'utilisez pas s'il semble mal fonctionner ou endommagé.

Utilisez l'appareil lorsque la température ambiante est entre 0 et +40 °C et le taux d'humidité entre 10 et 93 %.

Votre Popit Sense n'est pas étanche et doit toujours rester au sec. Si besoin, nettoyez-le avec un chiffon imbibé d'eau tiède (NE PAS utiliser de détergent pour ne pas endommager l'appareil).

Pour une durée de vie jusqu'à 12 mois avec une pile bouton de qualité supérieure, tous les capteurs ne peuvent pas être actifs en permanence. Il est donc important de respecter l'usage décrit dans ce guide d'utilisation afin d'obtenir une précision optimale.

En raison de la grande variété de plaquettes et manières de prendre des comprimés, la détection automatique peut parfois donner des résultats erronés. Nous nous efforçons d'éviter cela en développant constamment nos produits.

## ÉLIMINATION

DEEE : Le symbole sur le produit et son emballage signifie que ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères à la fin de sa vie.

Veuillez noter qu'il vous incombe de jeter les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles.

Chaque pays de l'Union européenne doit disposer de centres de collecte pour recycler les appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur votre lieu de collecte, contactez l'autorité locale de gestion des déchets d'appareils électriques et électroniques ou le revendeur de votre produit.



## **GARANTIE**

Popit Sense s'accompagne d'une garantie limitée d'un (1) an. Cela signifie que, pour tout produit défectueux, nous proposerons un échange jusqu'à un an à compter de la date d'achat initiale. Le client doit nous contacter pour obtenir une autorisation de retour de marchandise (RMA). Cette garantie ne s'applique pas:

- (a) aux dommages esthétiques, y compris, mais sans limitation, les éraflures et les bosses ;
- (b) aux dommages causés par un incident, à une mauvaise utilisation, à un usage déraisonnable, à une immersion dans l'eau, à une négligence, à un abus, à une fuite de la pile, à un service inadéquat, ou à toute autre cause externe ;
- (c) aux dommages causés par l'utilisation du produit en dehors des usages autorisés ou prévus décrits par Popit Ltd. dans la notice jointe ;
- (d) à un produit ou une pièce qui a été modifié ;
- (e) aux imperfections causées par l'usure ou le vieillissement normal du produit.

## **INFORMATIONS LÉGALES**

Notes réglementaires : Union européenne : Directive CE.

DÉCLARATION : Popit Ltd. déclare par la présente que Popit Sense est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

# QUI CONTACTER

En cas de problème avec votre produit Popit, notre équipe vous aidera avec plaisir.

[www.popit.io](http://www.popit.io)  
[reachout@popit.io](mailto:reachout@popit.io)

Popit Ltd.  
Metsänneidonkuja 6  
02130 Espoo  
FINLAND

Contactez votre médecin pour toute demande d'ordonnance ou d'assistance médicale.