



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Popit!

Η Popit Sense και η εφαρμογή Popit App σας βοηθούν να θυμάστε να λαμβάνετε τα χάπια σας εγκαίρως και να σας υποστηρίζουν με τη θεραπεία σας.

Η Popit Sense και η εφαρμογή Popit App προορίζονται για να υποβοηθούν οποιοδήποτε σύστημα υπενθύμισης χρησιμοποιείτε ήδη ώστε να θυμάστε να λαμβάνετε τη φαρμακευτική αγωγή σας.

Πρέπει να αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη λήψης της φαρμακευτικής αγωγής σας την κατάλληλη ώρα και να ακολουθείτε τις οδηγίες του Ιατρού που σας παρακολουθεί.

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


iPhone - App Store
Android - Google Play
Huawei - AppGallery



Ανοίξτε την εφαρμογή Popit App, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις και μετά παρακολουθήστε την καθοδηγούμενη περιήγηση.



2 ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΡΟΡΙΤ SENSE ΣΑΣ

Υποδοχή καρτέλας
χαπιών

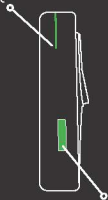

Πλαϊνό κουμπί


Κουμπί κλειδώματος

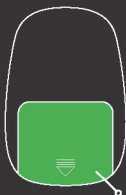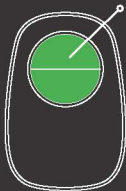

Θήκη μπαταρίας

3

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΣΑΣ

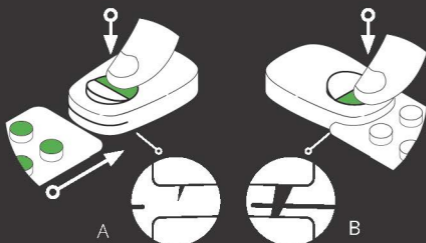

ΠΙΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ το πίσω μέρος του Κουμπιού Κλειδώματος και εισάγετε πλήρως την καρτέλα χαπιών με τα χάπια να βλέπουν προς τα πάνω.

Πιέστε δυνατά την άλλη πλευρά του Κουμπιού Κλειδώματος για να ασφαλίσετε πλήρως τον μηχανισμό κλειδώματος.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΧΑΠΙΩΝ

Πιέστε και κρατήστε το Κουμπί Κλειδώματος όπως στο βήμα Α και αφαιρέστε την καρτέλα χαπιών. Επαναλάβετε τα βήματα Α και Β για να εισάγετε τη νέα καρτέλα.

Αντικαταστήστε την καρτέλα χαπιών με νέα αμέσως μόλις τελειώσει η παλιά, προκειμένου να συνεχιστεί η καταγραφή λήψης χαπιών απρόσκοπτα.

4 ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΠΙΩΝ ΣΑΣ

Το Popit Sense διαθέτει δύο τρόπους καταγραφής της λήψης των χαπιών σας:

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Τρεις αισθητήρες λειτουργούν στη σειρά για να ανιχνεύουν την εξαγωγή χαπιού με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Το Popit Sense είναι εφοδιασμένο και με δυνατότητα χειροκίνητης ανίχνευσης ως υποστήριξη της αυτόματης ανίχνευσης.

ΗΧΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Με τους δύο τρόπους ανίχνευσης, θα ακούσετε τέσσερα μπιπ αυξανόμενης έντασης που θα επιβεβαιώσουν ότι η δόση σας έχει καταγραφεί με επιτυχία.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΚΙΝΗΣΗ

Το Popit Sense ανιχνεύει συνεχώς την κίνηση. Εάν ανιχνευθεί κίνηση, η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή για να την αγγίξετε.



Παίρνετε πολλά χάπια; Θα ακούσετε μόνο ένα σετ ήχων επιβεβαίωσης για όλα τα χάπια που λαμβάνονται την ίδια ώρα.

Καταγράφηκε κάποιο χάπι κατά λάθος; Κανένα πρόβλημα! Η εφαρμογή Popit App σας επιτρέπει να αναιρέσετε τη δόση αυτή.


Δεν ανιχνεύτηκε άγγιγμα; Εάν ανιχνεύτηκαν περισσότερες κινήσεις, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία ύπνου (sleep) για εξοικονόμηση μπαταρίας. Αφήστε τη συσκευή για ένα λεπτό πάνω σε ένα τραπέζι ή χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη ανίχνευση.

Μην μεταφέρετε το Popit Sense στην τσέπη ή την τσάντα σας χωρίς το κάλυμμά του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση των αισθητήρων.



ΑΦΗ

Για την εγγραφή με αφή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα όταν λαμβάνετε ένα χάπι:

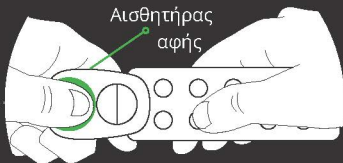

Κρατήστε τη συσκευή και την καρτέλα χαπιών έτσι ώστε το ένα χέρι να κρατά τη συσκευή και το άλλο την καρτέλα χαπιών.



Μόλις ανιχνευτεί αφή, θα ακούσετε ένα διπλό μπιπ. Τότε βγάλτε σταθερά ένα χάπι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κάνοντας αυτό, δεν θα χρειαστεί να αγγίξετε άλλο τη συσκευή.



ΗΧΟΣ

Τέλος, το Popit Sense ακούει τον ήχο εξαγωγής χαπιού. Εάν η εξαγωγή είναι επιτυχής, το πλαϊνό κουμπί θα αναβοσβήσει επιπρόσθετα με τον ήχο επιβεβαίωσης.



Δεν το καταλάβατε; Κανένα πρόβλημα!
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την χειροκίνητη ανίχνευση.


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Πατήστε στιγμιαία το Πλαϊνό Κουμπί για να καταγράψετε χειροκίνητα τη δόση σας. Εάν παίρνετε περισσότερα χάπια, θα πρέπει να το πατήσετε μία φορά μόνο αφού πάρετε όλα τα χάπια.

Μπορείτε επίσης, να καταγράψετε χειροκίνητα τη δόση σας στην εφαρμογή Popit App.

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ

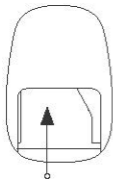

Το Porit sense λειτουργεί με μπαταρία 3 Volt CR2032 λιθίου - μετάλλου τύπου coin cell (περιλαμβάνεται). Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνο τις αποδεκτές μπαταρίες τύπου CR2032 ή DL2032 γνωστών εμπορικών ονομασιών.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 3-12 μήνες με κανονική χρήση. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τον αριθμό των χαπιών που θα χρειαστεί να ανιχνεύει ημερησίως το Porit Sense. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας επιτυγχάνεται με την ανίχνευση ενός χαπιού την ημέρα ή με λιγότερο συχνή δοσολογία.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σύρτε το καπάκι της θήκης μπαταρίας και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Σύρτε τη νέα μπαταρία στη θέση της, φροντίζοντας η πλευρά με το κείμενο της μπαταρίας να βλέπει προς τα πάνω. Κλείστε τη θήκη μπαταρίας σύροντας το καπάκι στην θέση του και φροντίζοντας να κλείσει η θήκη σωστά.

Μην φορτίζετε, αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία

Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Κατά την απόρριψη των μπαταριών, απομονώστε τις όψεις + και - με μονωτική ή μη αγώγιμη ταινία. Εάν απορριφθούν λανθασμένα, οι μπαταρίες λιθίου ενδέχεται να βραχυκυκλώσουν, προκαλώντας την θερμότητα, την έκρηξη ή την ανάφλεξη τους.

Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από ανοιχτή φλόγα. Εάν μια μπαταρία είναι κατεστραμμένη, μην την αγγίζετε με γυμνά χέρια και χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας.

Μην επιτρέψετε σε παιδιά και κατοικίδια να πλησιάζουν τη μπαταρία. Καταπιείτε την μπαταρία, καλέστε αμέσως τις πρώτες βοήθειες για περαιτέρω οδηγίες.

Αποθηκεύστε τις καινούριες και αχρησιμοποιήτες μπαταρίες σε στεγνό μέρος και διατηρείτε τη θερμοκρασία μεταξύ -30 °C και 60 °C.

Εάν μια μπαταρία μεταφερθεί στο εξωτερικό με αεροπλάνο, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας του αερομεταφορέα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος συσκευής: Μ45χιλ. x Π30χιλ. x Υ13χιλ.

Υλικό θήκης: Πλαστικό

Το Popit Sense είναι ηλεκτρονική συσκευή και απαιτεί προσεκτικό χειρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε το Popit Sense εάν φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά ή να είναι χαλασμένο.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 0 °C και 40 °C και επίπεδο υγρασίας μεταξύ 10% και 93%.

Η συσκευή Popit Sense δεν είναι αδιάβροχη και πρέπει πάντα να διατηρείτε στεγνή. Εάν χρειάζεστε, μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα νωπό, χλιαρό πανί (ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ καθαριστικό γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή).

Για να επιτευχθεί η διάρκεια ζωής των 12 μηνών της μπαταρίας με χρήση μιας υψηλής ποιότητας μπαταρίας τύπου coin cell, δεν θα πρέπει όλοι οι αισθητήρες να είναι ενεργοί συνεχώς. Συνεπώς, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης που απεικονίζονται στον παρόντα οδηγό χρήσης προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας διαθέσιμων τύπων κυψέλης (blister) των χαπιών και των πολυάριθμων τρόπων λήψης χαπιών, η αυτόματη ανίχνευση ενδέχεται να παράσχει κάποιες φορές εσφαλμένα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα περιστατικά με συνεχή ανάπτυξη της συσκευής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

WEEE: Το σύμβολο πάνω στο προϊόν και τη συσκευασία του δηλώνει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί στο τέλος της ζωής του, χωριστά από τα συνήθη οικιακά απορρίματα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι έχετε την ευθύνη απόρριψης ηλεκτρικού εξοπλισμού σε κέντρα ανακύκλωσης έτσι ώστε να συμβάλλετε στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαθέτει κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με το σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρχή διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Το Popit Sense καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση ενός (1) έτους. Αυτό σημαίνει, ότι για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν, θα προσφέρουμε τη δυνατότητα αλλαγής μέχρι έναν χρόνο μετά από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για να λάβει μια εξουσιοδότηση αλλαγής εμπορευμάτων (RMA). Η Εγγύηση δεν ισχύει για:

- (α) ζημιές στην εμφάνιση, Συμπεριλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε γρατσουνιές και βαθουλώματα,
- (β) ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ατυχήματος, κακής ή μη εύλογης χρήσης, βύθισης σε νερό, παραμέλησης, κακής μεταχείρισης, διαρροής μπαταρίας, εσφαλμένης συντήρησης ή άλλων εξωτερικών αιτιών,
- (γ) ζημιές που προκλήθηκαν λόγω λειτουργίας του προϊόντος εκτός των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων όπως αυτές περιγράφονται από την Popit Ltd. στο συνοδευτικό φυλλάδιο,
- (δ) περιπτώσεις όπου ένα προϊόν ή τμήμα αυτού έχει υποστεί κάποια τροποποίηση,
- (ε) ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω φυσιολογικής φθοράς του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κανονιστικές σημειώσεις: Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών ΗΠΑ. (FCC). Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες:

- 1) η συσκευή αυτή ενδέχεται να μην προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές, και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία.

Περιέχει FCC ID:2APJ5-P51TYP

Κανονιστικές σημειώσεις: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ IC Καναδά

Η συσκευή περιέχει πομπό(-ούς)/δέκτη (-ες), οι οποίοι συμμορφώνονται με τα εξαιρούμενα πρότυπα R55 Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες:

- 1) η συσκευή αυτή ενδέχεται να μην προκαλέσει παρεμβολές,
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία της συσκευής.

Περιλαμβάνει IC: 23793-P51TYP

Κανονιστικές σημειώσεις: Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία CE.

ΔΗΛΩΣΗ: Με το παρόν, η Popit Ltd. δηλώνει ότι η συσκευή Popit Sense συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

www.popit.io

Popit Ltd.
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
FINLAND

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Ιατρό σας εάν χρειάζεστε ιατρική βοήθεια ή συνταγογράφηση.